

SoloSTAR[®] Quick Reference Guide

For patients using the Apidra[®] and/or the Lantus[®] SoloSTAR[®]


These instructions are supplied as a guide only. Always read the full instruction leaflet before you use the SoloSTAR[®] ready-to-use injection pen for the first time. If you have any questions, ask your healthcare professional.

1 Check the insulin

- Verify you have the right insulin.
- Take off the pen cap and check the appearance of the insulin, it should be clear.


2 Attach the needle

- Wipe the rubber seal with alcohol.
- Remove the protective seal, and attach a new needle.

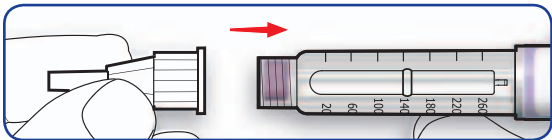


3 Do a safety test

- Set a dose of 2 units.

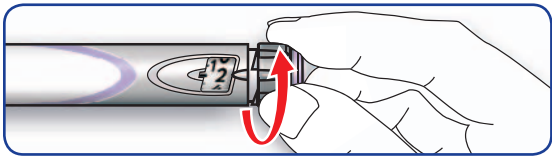


- Take off both needle caps.
- Hold the pen with the needle pointing up.
- Tap the insulin reservoir so that any air bubbles rise up towards the needle.
- Press the injection button all the way in and check that insulin comes out.

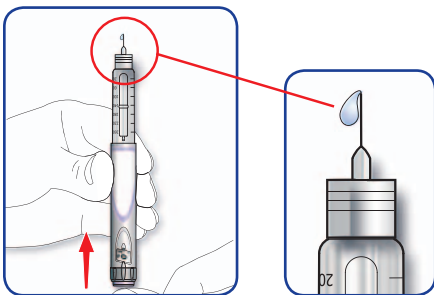

- If insulin does not come out, repeat the test.
- If no insulin comes out after 3 attempts, attach a new needle and try again.


4 Set your dose

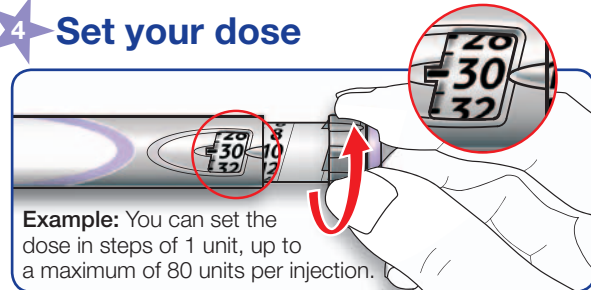

Example: You can set the dose in steps of 1 unit, up to a maximum of 80 units per injection.

5 Inject your dose

- Insert the needle into the skin, as instructed by your healthcare professional.
- Press the button all the way in.
- Keep the button pressed in and slowly count to 10.
- Withdraw the needle.

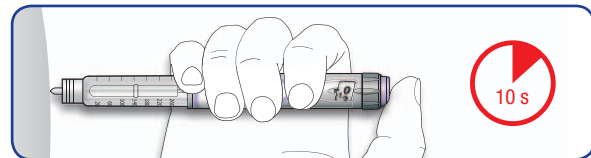

6 Finish

- Put the outer needle cap back on and use it to unscrew the needle from the pen.
- Dispose of the needle safely, e.g., in a sharps container.
- Put the pen cap back on.

24 24-HOUR SUPPORT
1.888.852.6887

! IF YOU CAN'T dial to the dose you want, check if you have enough insulin in the reservoir.
IF NO INSULIN COMES OUT after changing the needle, your SoloSTAR[®] may be damaged. Do not use this SoloSTAR[®].
EACH SoloSTAR[®] is for use by one person only.

For more information about your medication or your injection pen, please visit our website at www.sanofi.ca.

**SoloSTAR[®]**

Guide de consultation rapide SoloSTAR®

Pour les patients utilisant le Apidra® et/ou le Lantus® SoloSTAR®


Les instructions suivantes ne vous sont offertes qu'à titre de référence. Lisez toujours le mode d'emploi complet avant d'utiliser le stylo injecteur prêt à l'emploi SoloSTAR® pour la première fois. Si vous avez des questions, adressez-vous à votre professionnel de la santé.

1 Vérifiez l'insuline

- Assurez-vous d'avoir la bonne insuline.
- Retirez le capuchon du stylo et examinez l'aspect de l'insuline; elle devrait être claire.


2 Fixez l'aiguille

- Essayez la rondelle de caoutchouc avec un tampon d'alcool.
- Retirez le film protecteur et posez une nouvelle aiguille.

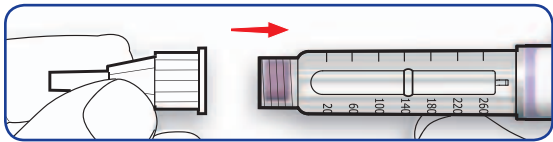


3 Faites un test de sécurité

- Sélectionnez une dose de 2 unités.

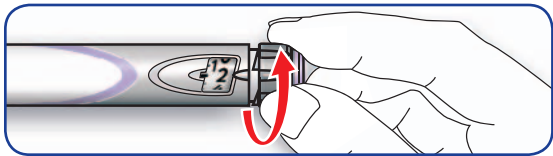


- Retirez les deux capuchons de l'aiguille.
- Tenez le stylo de sorte que l'aiguille pointe vers le haut.
- Tapotez le réservoir d'insuline afin que les bulles d'air se retrouvent près de l'extrémité supérieure.
- Appuyez à fond sur le bouton d'injection et vérifiez si de l'insuline sort de l'aiguille.

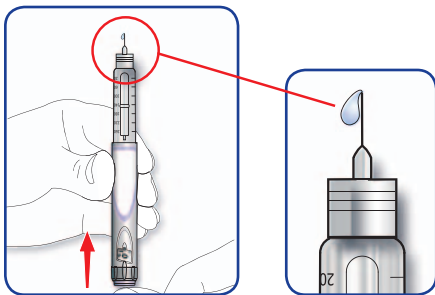

- S'il ne sort pas d'insuline, vous devez recommencer le test.
- Si l'insuline ne sort pas après 3 tentatives, remplacez l'aiguille par une nouvelle et essayez de nouveau.


4 Sélectionnez votre dose

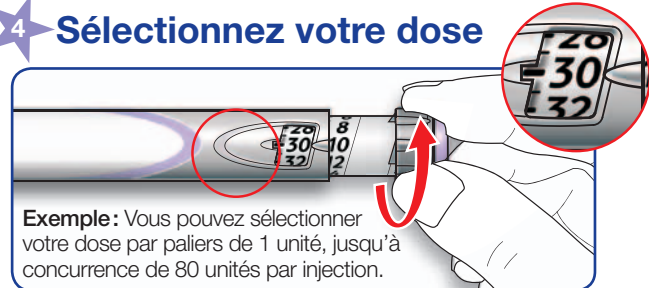

Exemple: Vous pouvez sélectionner votre dose par paliers de 1 unité, jusqu'à concurrence de 80 unités par injection.

5 Injectez-vous la dose

- En utilisant la méthode d'injection enseignée par votre professionnel de la santé, introduisez-vous l'aiguille dans la peau.
- Appuyez à fond sur le bouton d'injection.
- Gardez le bouton d'injection enfoncé et comptez lentement jusqu'à 10.
- Retirez l'aiguille.

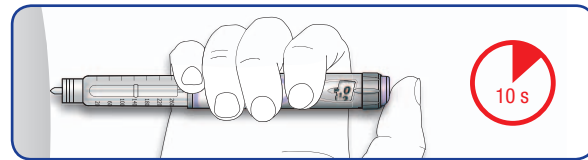

6 Dernière étape

- Remettez le capuchon extérieur sur l'aiguille et servez-vous-en pour dévisser l'aiguille du stylo.
- Jetez l'aiguille de façon sécuritaire, p. ex., dans un contenant pour objets pointus et tranchants.
- Remettez le capuchon sur le stylo.



**ASSISTANCE 24 HEURES :
1.888.852.6887**



SI VOUS N'ARRIVEZ PAS à sélectionner la dose voulue, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'insuline dans le réservoir. **SI L'INSULINE NE S'ÉCOULE PAS** après que vous ayez changé l'aiguille, il se peut que votre stylo SoloSTAR® soit endommagé. Ne l'utilisez pas. **CHAQUE STYLO SoloSTAR®** n'est destiné qu'à un seul utilisateur.

Pour plus d'information au sujet de votre médicament ou votre stylo injecteur, visitez notre site web au www.sanofi.ca.

**SoloSTAR®**